

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

「取扱説明書」はいつでも参照できるように、見やすい所に大切に保管してください。

本書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

● 用途

運動療法機器のグリップやバーを握力が弱く掴みくい場合や、不意に手を離したりすることを防ぐために固定をするものです。

● 安全上のご注意



注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。

 注意 ... 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

- 医師や指導者の指示に従ってお使いください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。けがをすることがあります。
- 握力の無い方の固定はできません。
- 体重をかけてぶら下がる、重いものを手前に引くなどの方法で使用しないでください。伸縮性があるために締め付けられる恐れや破損する恐れがあります。
- 使用前に破れや破損がないことを確認してください。異常を発見したまま使用すると、けがをすることがあります。
- しっかり装着されて使用中に外れないことを確認してください。外れると、けがをすることがあります。
- 複数の人に使用する場合は、洗濯等の適切な処置をしてから使用してください。
- 損傷が激しい場合や、劣化やごみの付着等によりマジックテープの保持力が低下してきた場合は、新しいものとお取り替えください。

● お手入れの仕方

洗うときは、マジックテープを本体起毛部分に接着させてから手洗いをしてください。きちんと接着させないと、ごみの付着による保持力の低下や手指を傷つけたり、他の洗濯物を傷めたりする恐れがあります。


水またはぬるま湯で洗ってください。

漂白剤は使用しないでください。

柔軟剤は使用しないでください。

日陰に干してください。


● 装着の仕方

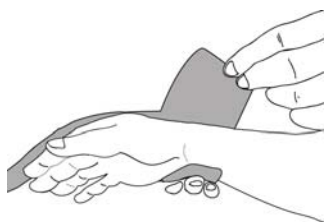


①手首に巻きつける




②巻きつけたら、マジックテープでとめる

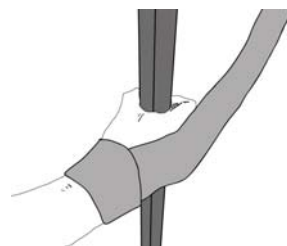


③利用者がグリップやバーを握る

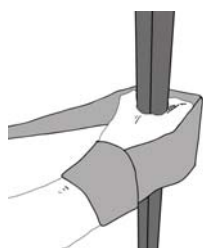


④手の甲を覆う

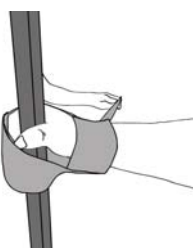


⑤指部分を覆う

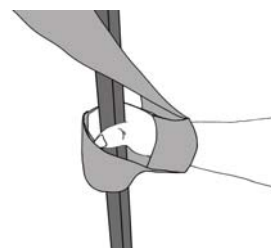

⑥手首の下から上に巻き上げる

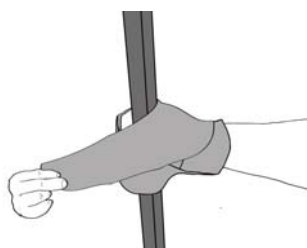

⑦親指部分を覆う

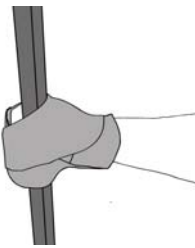

⑧マジックテープで止めて完了

※固定後にうっ血等が発生していないことを確認してください。

また、長時間の使用は、うっ血等の原因となることがありますので避けてください。

● 仕様

- 材 質：・ 本体生地…ポリエステル+合成ゴム+ナイロン／PU
・ ネーム…ポリエステルテープ
・ 縫製糸…ポリエステル
・ マジックテープ…ポリエステル

寸 法：240×800mm

注) 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

生地を裁断・縫製しているため、大きさに多少違いがでます。寸法は目安としてください。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6 〒162-0801
<http://www.sakaimed.co.jp>

— お問い合わせ (午前 9:00～午後 5:00) —

- 修理に関するお問い合わせ：
健康被害などが発生した場合：
・ サポートセンター フリーダイヤル 0120-161-288
・ または、平日のみ最寄りの営業所へ
- 商品に関するお問い合わせ：
最寄りの営業所へ